

### Precauzioni per il prelievo:

**NON rimuovere la pellicola di plastica dal coperchio dell'imbuto.**

**Controllare l'eventuale danneggiamento della spugna prima di ogni inserimento nella bocca del donatore. Se la prima spugna mostra segni di usura o di rottura, utilizzare la seconda spugna.**

**NON sostituire con altre spugne o tamponi.**

**Uso previsto:** Per il prelievo assistito di DNA umano da campioni di saliva.

**Contenuto:** il kit contiene liquido di stabilizzazione.

### Avvertenze e precauzioni

#### Rischi di soffocamento:

- Cappuccio piccolo del kit di prelievo.
- Sacchetto di plastica contenente spugne.
- Prestare attenzione mentre si inserisce una spugna nella bocca del donatore.

#### Per i prelievi con supervisione:

- NON lasciare solo il donatore.
- NON consentire al donatore di maneggiare la spugna, il cappuccio piccolo o l'imballaggio.
- Se il liquido di stabilizzazione viene a contatto con occhi o pelle, risciacquare con acqua. Non ingerire. Vedere la scheda di sicurezza riportata su [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

**Conservazione:** 15°C / 30°C

### Riassunto e spiegazione del kit:

Oragene-DNA è un kit di prelievo assistito che fornisce i materiali e le istruzioni per il prelievo e la stabilizzazione di campioni di saliva.

### Legenda dell'etichetta:

	Consultare il foglietto illustrativo allegato alla confezione
	Raccogliere la saliva entro (Usare entro)
	Dispositivo medico diagnostico in vitro
	Numero di catalogo
	Marchatura CE
	Attenzione, consultare le istruzioni per l'uso
	Istruzioni per la conservazione
	Rappresentante autorizzato
	Produttore
	Numero di lotto

## ISTRUZIONI PER L'USO


Prima della raccolta, leggere tutte le istruzioni

### Procedimento:


**Assicurarsi che il donatore NON assuma alimenti o liquidi, non fumi o mastichi chewing-gum nei 30 minuti che precedono il prelievo di un campione di saliva.**

**Assicurarsi che durante il prelievo del campione il donatore sia in posizione verticale.**


**Per il prelievo di un campione di saliva seguendo i passaggi da 1 a 7 possono essere necessari fino a 15 minuti.**

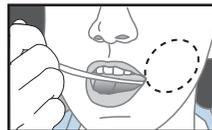

- 1 Inserire una spugna all'interno della guancia. Muovere delicatamente la spugna lungo le gengive e la parte interna della guancia per 30 secondi in modo da assorbire quanta più saliva possibile.

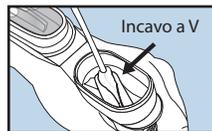

- 2 Quando la spugna è satura di saliva, inserire la spugna nell'incavo a V dell'imbuto. Estrarre la saliva dalla spugna utilizzando un movimento di rotazione e spinta contro la parete interna dell'incavo a V. La saliva fluirà all'interno della provetta.

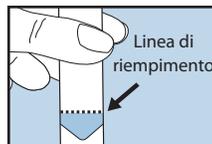


- 3 Ripetere questi passaggi (da 1 a 2) UTILIZZANDO LA STESSA SPUGNA fino a quando la saliva liquida (escluse le bolle) raggiunge la linea di riempimento. Controllare l'eventuale danneggiamento della spugna prima di ogni inserimento nella bocca del donatore. Se la prima spugna mostra segni di usura o di rottura, utilizzare la seconda spugna.


Picchiettare delicatamente la base della provetta su una superficie dura in modo da ridurre il numero di bolle.



- 4 Tenere la provetta verticalmente con una mano. Chiudere il coperchio dell'imbuto con l'altra mano come mostrato, premendo il coperchio con decisione fino a sentire chiaramente uno scatto. Il liquido presente nel coperchio verrà rilasciato nella provetta, mescolandosi con la saliva. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso ermeticamente.

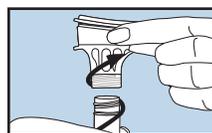

- 5 Tenere la provetta verticalmente. Svitare la provetta dall'imbuto.

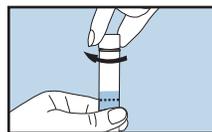

- 6 Chiudere ermeticamente la provetta utilizzando il cappuccio piccolo.



- 7 Agitare la provetta con il cappuccio inserito per 5 secondi. Rimuovere la carta dall'imbuto e dalle spugne.



Per uso diagnostico in vitro

**DNAgenotek**



Prodotto in Canada  
 DNA Genotek Inc.  
 3000 - 500 Palladium Drive  
 Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Campioni di alta qualità  
 Performance dimostrata*

Tel: +1.613.723.5757  
 Fax: +1.613.723.5057  
 info@dnagenotek.com  
 www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Oragene-DNA non è in vendita negli Stati Uniti d'America.

\*Oragene è un marchio registrato di DNA Genotek Inc.

Alcuni prodotti DNA Genotek potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche, contattare gli agenti di vendita della propria zona per avere maggiori informazioni.

Tutti i protocolli, white paper e documenti applicativi di DNA Genotek sono reperibili nella sezione Support del nostro sito Internet [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Brevetto ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2017 DNA Genotek Inc., una consociata di OraSure Technologies, Inc., tutti i diritti riservati.  
 PD-PR-00321 (IT - Italian) Issue 3/2017-11