




ORagene®DNA

REF OG-500 i OG-510

REF OG-600 i OG-610

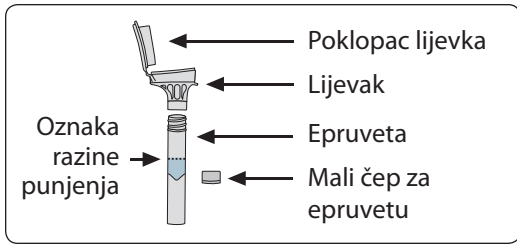

Mjere opreza pri prikupljanju:

NE smijete jesti, piti, pušiti, žvakati žvakaću gumu 30 minuta prije davanja uzorka sline.

NEMOJTE odstraniti plastičnu foliju s poklopca lijevka.

Svrha uporabe: za prikupljanje ljudske DNK iz uzoraka sline.

Sadržaj: komplet sadrži tekućinu za stabilizaciju.

Upozorenje i mjere opreza: Isperite vodom ako tekućina za stabilizaciju dođe u doticaj s očima ili kožom. NEMOJTE progutati. Vidi sigurnosno-tehnički list na www.dnagenotek.com.

Mali čep predstavlja opasnost od gušenja.

Čuvanje: 15°C - 30°C

Sažetak i pojašnjenje kompleta:

Oragene-DNA je komplet za samoprikupljanje koji sadrži materijale i upute za prikupljanje i stabilizaciju uzoraka sline.

Objašnjenje oznake:


	Proučite upute za primjenu
	Prikupljanje sline od strane (uporaba od strane)
	In vitro dijagnostički medicinski uređaj
	Kataloški broj
	CE označavanje
	Oprez, proučite upute za uporabu
	Upute za čuvanje
	Ovlašteni predstavnik
	Proizvođač
	Broj šarže

UPUTE ZA UPORABU


Prije prikupljanja pročitajte kompletne upute.

Postupak:


Većini je ljudi potrebno 2 do 5 minuta za davanje uzorka sline ako slijede korake od 1 do 5.

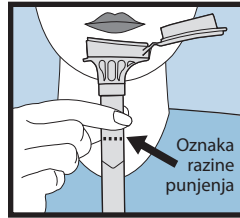


1 Pljucite u lijevak dok količina tekuće sline (ne mjehurići) ne dosegne oznaku prikazanu na slici #1.

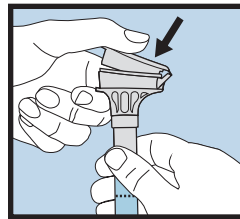


2 Držite epruvetu uspravno jednom rukom. Zatvorite poklopac lijevka drugom rukom (kao što je to prikazano) čvrsto ga gurajući dok ne čujete glasan klik. Tekućina se iz poklopca ispušta u epruvetu radi miješanja sa slinom. Poklopac čvrsto zatvorite.

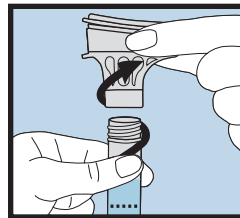

3 Držite epruvetu uspravno. Odrvnite lijevak s epruvete.

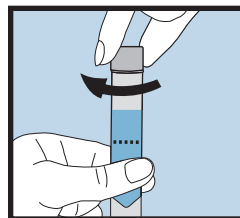

4 Malim čepom čvrsto zatvorite epruvetu.

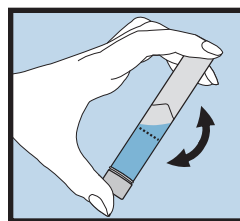

5 Protresajte zatvorenu epruvetu 5 sekundi. Bacite ili reciklirajte lijevak.



Za in vitro dijagnostičku uporabu

DNAgenotek



Proizvedeno u Kanadi
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Vrhunski uzorci

Dokazana učinkovitost

Tel.: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Oragene®-DNA nije u prodaji u Sjedinjenim Američkim Državama.

*Oragene je registrirani zaštitni znak kompanija DNA Genotek Inc.

Neki proizvodi kompanija DNA Genotek Inc. nisu dostupni u svim zemljopisnim regijama, za detalje se obratite svom prodajnom predstavniku.

Svi proizvodi od DNA Genotek, informativne publikacije i naputci o primjeni dostupni su u odjelu za tehničku podršku na našoj mrežnoj stranici www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2017 DNA Genotek Inc., podružnica kompanije OraSure Technologies Inc., sva prava zadržana.
PD-PR-00366 (HR - Croatian) Issue 3/2017-02