

# OM-AC1 accessorio per water

Utilizzato con  **OMNIGene®GUT**


## ISTRUZIONI PER L'USO

Questo accessorio per water è utilizzato con il kit OMNIGene®GUT per agevolare il prelievo di campioni di feci.


**Attenzione:** NON fare entrare in contatto questo accessorio per water con acqua proveniente dal water, urina, detersivi o profumi.

**Conservazione:** da 15°C a 25°C


### Procedimento

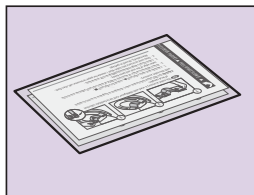


- 1** Vengono forniti due accessori per water in caso non fosse possibile prelevare il campione al primo tentativo.

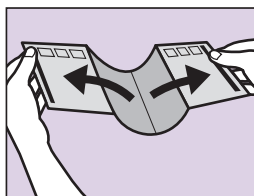


- 2** Rimuovere con cautela l'estremità contrassegnata con ▲; ripetere l'operazione con l'estremità contrassegnata con ■.

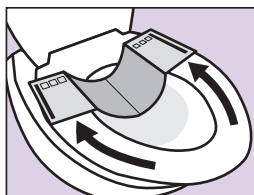

- 3** Far aderire la superficie adesiva dell'accessorio alla **PARTE POSTERIORE del sedile del water** con l'adesivo vicino al bordo esterno del sedile e premere con decisione.

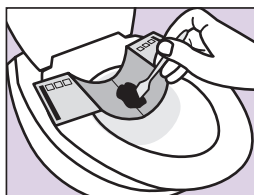

- 4** Prelevare il campione di feci seguendo le istruzioni per l'uso di OMNIGene®GUT.

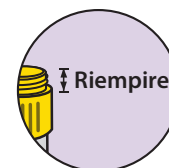

- 5** Gettare l'accessorio utilizzato nel water. Attendere un minuto che la carta si ammorbidisca e quindi sciacquare. In alternativa, smaltire nei rifiuti.

Un minuto

**DNA genotek**



OM-AC1 è prodotto nei Paesi Bassi per DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Campioni di alta qualità  
Performance dimostrata*

Tel.: +1.613.723.5757  
Fax: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

\*OMNIGene è un marchio registrato di DNA Genotek Inc.

Alcuni prodotti DNA Genotek potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche, contattare gli agenti di vendita della propria zona per avere maggiori informazioni.

Tutti i protocolli, white paper e documenti applicativi di DNA Genotek sono reperibili nella sezione Support del nostro sito Internet [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Brevetto ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2018 DNA Genotek Inc., una consociata di OraSure Technologies, Inc., tutti i diritti riservati.  
PD-PR-00727 (IT - Italian) Issue 2/2018-08

CE