

OM-AC1 Toalettillbehör

Används med  **OMNIGene®GUT**


BRUKSANVISNING

Detta toalettillbehör används med OMNIGene®GUT-kit för att underlätta insamlingen av fekalprov.


Varning: Låt INTE toalettvattnen, urin, rengöringsmedel eller doft komma i kontakt med detta toalettillbehör.

Förvaring: 15 °C till 25 °C


Procedur:

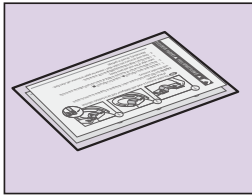


- 1** Två toalettillbehör ingår om du inte kan samla in något prov på det första försöket.

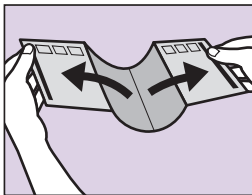


- 2** Öppna kanten försiktigt med ▲; upprepa för kant med ■.

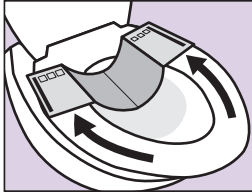

- 3** Fäst tillbehörets klistriga yta i **toalettstolens BAKSIDA** med klistret nära sitsens ytterkant och tryck till.

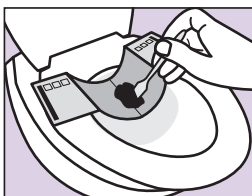

- 4** Samla in fekalprovet genom att följa bruksanvisningen för OMNIGene®GUT.

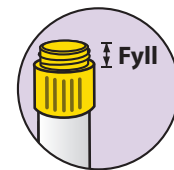

- 5** Släpp ned förbrukat tillbehör i toaletten. Vänta 1 minut tills pappret har blivit mjukt och spola sedan. Du kan också kasta det i papperskorgen.

1 minut

DNA genotek



OM-AC1 tillverkas i Nederländerna för DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Överlägsna prover
Bevisad prestanda*

Tel: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

*OMNIGene är ett varumärke registrerat av DNA Genotek Inc.
Vissa DNA Genotek-produkter är kanske inte tillgängliga i alla geografiska regioner, kontakta din försäljningsrepresentant för detaljer.
Alla DNA Genoteks protokoll, policyer och anteckningar finns under supportavdelningen på vår webbplats www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2018 DNA Genotek Inc., dotterbolag till OraSure Technologies, Inc., med ensamrätt.
PD-PR-00797 (SV - Swedish) Issue 1/2018-07

CE