

# Дополнительные принадлежности для унитаза OM-AC1

Предназначено для использования с набором 


## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данные принадлежности для унитаза используются вместе с набором OMNigene®-GUT для упрощения сбора образцов кала.


**Предупреждение:** избегать попадания воды из унитаза, мочи, моющих средств или отдушек на данные принадлежности для унитаза.

**Хранение:** при температуре от 15 до 25 °С.


### Процедура:

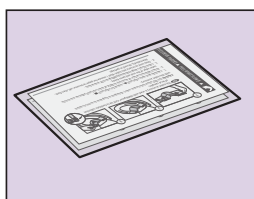


- 1** Упаковка содержит две единицы принадлежностей для унитаза на случай, если образец не удастся собрать с первой попытки.

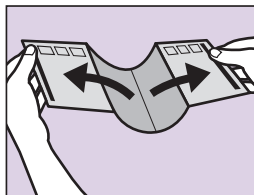

- 2** Осторожно разъедините края, обозначенные ▲; повторите процедуру, разъединив края с меткой. ■.

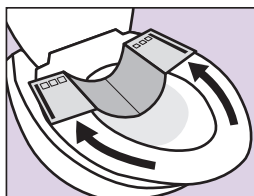

- 3** Зафиксируйте приспособление на **ЗАДНЕЙ** части крышки унитаза с помощью липкой полосы, которая должна располагаться ближе к внешнему краю крышки. Хорошо прижмите.

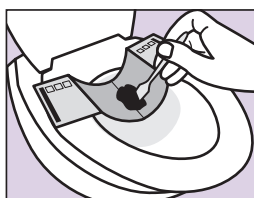

- 4** Соберите образец кала, следуя инструкции к набору OMNigene-GUT.



- 5** Выбросьте использованный элемент в унитаз. Подождите 1 минуту до размягчения бумаги и спустите воду в унитазе. Также принадлежности можно выбросить в урну.

**DNA genotek**  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

**Высококачественные образцы  
Доказанная эффективность**

Продукт OM-AC1 изготовлен в Нидерландах для компании DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Тел: +1.613.723.5757  
Факс: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

OMNigene® является зарегистрированной торговой маркой компании DNA Genotek Inc. Некоторая продукция компании DNA Genotek может отсутствовать в определенных географических регионах. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему торговому представителю. Все протоколы, нормативные документы и указания по применению для продукции компании DNA Genotek представлены на веб-сайте [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com) в разделе сопроводительной информации.

Патент ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))  
© DNA Genotek Inc. — филиал компании OraSure Technologies, Inc., 2018. Все права защищены.  
PD-PR-00799 (RU - Russian) Issue 1/2018-07

