

Środki ostrożności dotyczące pobierania:

NIE należy zdejmować plastikowej folii z pokrywki lejka.

Przed włożeniem do ust dawcy należy sprawdzić gąbkę pod kątem uszkodzeń. Jeśli pierwsza gąbka wykazuje ślady zużycia lub rozdarcia, należy użyć drugiej gąbki.

NIE zastępować innymi gąbkami ani wacikami.

Przeznaczenie: Do wspomaganego pobierania ludzkiego DNA z próbek śliny.

Zawartość: Zestaw zawiera płyn stabilizujący.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Ryzyko zadławienia:

- Mała zatyczka w zestawie do pobierania.
- Plastikowa torebka zawierająca gąbkę
- Należy zachować ostrożność przy wkładaniu gąbki do ust dawcy.

Do nadzorowanego pobierania:

- NIE pozostawiaj dawcy bez opieki.
- NIE pozwalaj dawcy dotykać gąbki, małej zatyczki lub opakowania.
- Jeśli płyn stabilizujący dostanie się do oczu lub na skórę, należy przemyć je wodą. Nie spożywać. Patrz MSDS na stronie www.dnagenotek.com.

Przechowywanie: 15°C / 30°C

Podsumowanie i omówienie zestawu:

Oragene-DNA jest zestawem do wspomaganego pobierania, który zawiera materiały i instrukcje dotyczące pobierania i stabilizacji próbek śliny.

Legenda etykiety:

	Zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania
	Termin pobrania próbki śliny (Termin przydatności do użycia)
	Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro
	Numer katalogowy
	Oznaczenie CE
	Przeostrożenie, zapoznać się z instrukcją użytkowania
	Instrukcje przechowywania
	Autoryzowany przedstawiciel
	Producent
	Numer partii

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA


Przed pobraniem próbki należy przeczytać wszystkie instrukcje

Procedura:


Upewnić się, że dawca NIE jadł, pił, palił lub żuł gumy na 30 minut przed podaniem próbki śliny.

Upewnić się, że podczas pobierania próbki dawca znajduje się w pozycji pionowej.


Pobranie próbki zgodnie z krokami od 1 do 7 może potrwać do 15 minut.

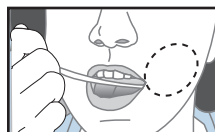

- 1 Umieść jedną gąbkę po wewnętrznej stronie policzka. Delikatnie przesuwaj gąbkę wzdłuż dziąseł i wewnętrznych ścian policzków przez 30 sekund, aby wchłonąć jak najwięcej śliny.

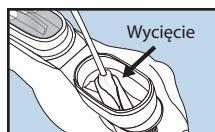


- 2 Gdy gąbka zostanie nasyciona śliną, włóż gąbkę do wycięcia w lejku. Wyciśnij ślinę z gąbki, skręcając i pchając gąbkę w stronę wewnętrznej ścianki wycięcia. Ślina wpłynie do probówki.

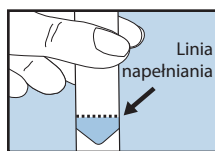


- 3 Powtarzaj te kroki (od 1 do 2), UŻYWAJĄC TEJ SAMEJ GĄBKII, aż płynna ślina (nie pęcherzyki) osiągnie linię napełniania. Przed włożeniem do ust dawcy należy sprawdzić gąbkę pod kątem uszkodzeń. Jeśli pierwsza gąbka wykazuje ślady zużycia lub rozdarcia, należy użyć drugiej gąbki.


Stuknij spodem probówki o twardą powierzchnię, aby zmniejszyć liczbę pęcherzyków.

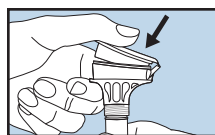

- 4 Trzymaj probówkę pionowo jedną ręką. Zamknij pokrywkę drugą ręką (jak pokazano), mocno dociskając pokrywkę, aż słychać będzie głośne kliknięcie. Płyn znajdujący się w pokrywce zostanie uwolniony do probówki w celu zmieszania ze śliną. Upewnij się, że pokrywka jest szczelnie zamknięta.

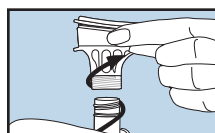

- 5 Trzymaj probówkę pionowo. Odkręć lejek z probówki.

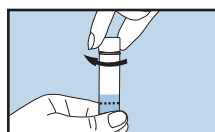

- 6 Użyj małej zatyczki, aby szczelnie zamknąć probówkę.



- 7 Potrząśnij zamkniętą probówką przez 5 sekund. Wyrzucić lejek i gąbki.



Do diagnostyki in vitro



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

DNagenotek™

*Doskonale próbki
Sprawdzona wydajność*

Wyprodukowano w Kanadzie
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Tel.: +1.613.723.5757
Faks: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

Produkt Oragene-DNA nie jest dostępny w Stanach Zjednoczonych.

*Oragene jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DNA Genotek™ Inc.

Niektóre produkty DNA Genotek mogą nie być dostępne we wszystkich regionach i należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania szczegółów.

Wszystkie protokoły DNA Genotek, dokumentacja i uwagi dotyczące zastosowania są dostępne w sekcji wsparcia na naszej stronie internetowej www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2020 DNA Genotek Inc., spółka zależna OraSure Technologies, Inc., wszelkie prawa zastrzeżone.
PD-PR-00989 (PL - Polish) Issue 1/2020-05