



Mjere opreza pri prikupljanju:

Pazite da vrh spužve NE dotakne bilo koju površinu prije prikupljanja.

Davatelj NE SMIJE jesti, piti, pušiti ili žvakati žvakaću gumu 30 minuta prije uzimanja uzorka pljuvačke.

Namjena: za prikupljanje i stabilizaciju RNA iz uzoraka ljudske pljuvačke

Sadržaj: Sadrži 1 komplet za prikupljanje













Upozorenje i mjere opreza: opasnost od gušenja. Potreban je oprez pri umetanju spužve u usta.

Ispirite vodom ako tekućina za stabilizaciju dođe u doticaj s očima ili kožom. NEMOJTE progutati. Pogledajte MSDS na www.dnagenotek.com

Čuvanje: 15°C-25°C

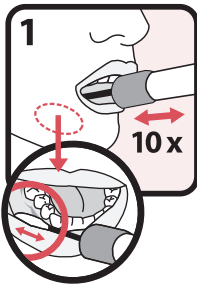
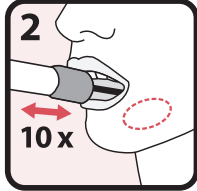
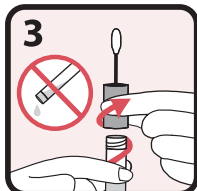
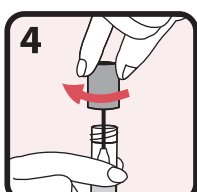
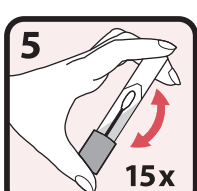
Sažetak i objašnjenje kompleta: ORACollect-RNA je komplet za samoprikupljanje koji sadrži materijale i upute za prikupljanje uzoraka ljudske pljuvačke.

Legenda etiketa:

	Kataloški broj
	Za uporabu samo na recept
	Dijagnostički medicinski uređaj
	CE oznaka
	UKCA oznaka
	Proizvođač
	Medicinski uređaj
	Nemojte ponovno koristiti
	Pogledajte upute za uporabu
	Koristite do
	Broj serije
	Ovlašteni predstavnik

HRVATSKI

Upute za prikupljanje uzoraka:

 <p>1</p>	<p>Otvorite paket i izvadite sakupljač ne dodirujući vrh spužve. Spužvu smjestite što je moguće više unatrag u usta i trljajte po donjim desnim (pogledajte sliku izbliza) naprijed-natrag. Nježno istrljajte desni 10 puta. Po mogućnosti izbjegavajte trljanje zuba.</p>
 <p>2</p>	<p>Nježno ponovite pokrete trljanja na suprotnoj strani usta duž donjih desni dodatnih 10 puta.</p>
 <p>3</p>	<p>Držite epruvetu uspravno kako biste spriječili prolijevanje sadržaja iz epruvete. Odrnite poklopac s epruvete za prikupljanje ne dodirujući spužvu.</p>
 <p>4</p>	<p>Okrenite poklopac naopako, umetnite spužvu u epruvetu i čvrsto zatvorite poklopac.</p>
 <p>5</p>	<p>Preokrenite zatvorenu epruvetu i snažno protresite 15 puta.</p>



Za IVD, Rx i za uporabu prema odobrenju za hitnu uporabu.

Ovaj uređaj za prikupljanje uzoraka nije odobren od strane FDA.

Ovaj uređaj za prikupljanje uzoraka odobren je od strane FDA prema EUA.

Ovaj uređaj za prikupljanje uzoraka odobren je samo za prikupljanje i održavanje uzoraka pljuvačke kao pomoć u otkrivanju nukleinske kiseline iz SARS-CoV-2 i ni za koje druge viruse ili patogene.

Ovaj uređaj za prikupljanje uzoraka odobren je samo za vrijeme trajanja izjave da postoje okolnosti koje opravdavaju odobrenje za hitnu uporabu in vitro dijagnostike za otkrivanje i/ili dijagnozu COVID-19 prema odjeljku 564(b)(1) Federalnog zakona o hrani, lijekovima i kozmetici, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), osim ako odobrenje ne bude ukinuto ili opozvano prije.

DNagenotek™

■ DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Vrhunski uzorci • Dokazana učinkovitost

Besplatna telefonska linija (Sjeverna Amerika): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Faks: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com • www.dnagenotek.com

 Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Odgovorno lice za Veliku Britaniju: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Australski sponzor: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australia

ORACollect je registrirani zaštitni znak, a DNA Genotek je zaštitni znak tvrtke DNA Genotek Inc. Neki proizvodi tvrtke DNA Genotek možda neće biti dostupni u svim zemljopisnim regijama; za detalje se obratite svom prodajnom predstavniku. Svi DNA Genotek protokoli, tehnički priručnici i napomene o prijavi dostupni su u odjeljku za podršku na našoj internetskoj stranici www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2021 DNA Genotek Inc., podružnica tvrtke OraSure Technologies, Inc., sva prava pridržana.
PD-PR-01071 (HR - Croatian) Issue 2/2021-04