



Piesardzības pasākumi pirms parauga paņemšanas:

Pārliecinieties, ka sūklīša gals pirms parauga paņemšanas NENONĀK saskarē ar jebkādu virsmu.

30 minūtes pirms siekalu parauga paņemšanas donors NEDRĪKST ēst, dzert, smēķēt vai lietot košļājamo gumiju.

Paredzētā lietošana: RNS savākšanai un stabilizēšanai no cilvēka siekalu paraugiem

Saturs: 1 parauga paņemšanas komplekts












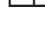
Bīdīnājumi un piesardzība: aizrišanās risks. Ievietojot sūklīti mutē, jāievēro piesardzība.

Ja stabilizējošais šķidrums nonāk saskarē ar acīm vai ādu, nomazgājiet to ar ūdeni. NENORĪT. Skatīt drošības datu lapu www.dnagenotek.com

Uzglabāšana: 15°C-25°C

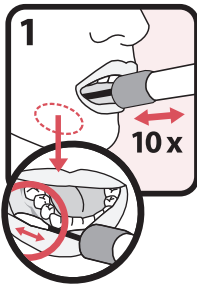
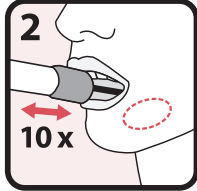
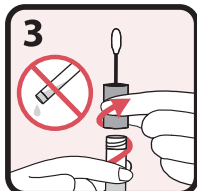
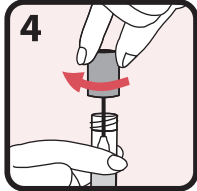
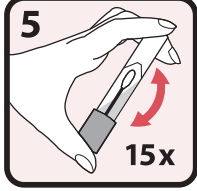
Komplekta apskats un skaidrojums: ORACollect-RNA ir parauga paņemšanas komplekts, kas satur materiālus un instrukcijas cilvēka siekalu paraugu savākšanai.

Etiķetes saturs:

	Kataloga numurs
	Nepieciešama recepte
	In vitro diagnostikas medicīniskā ierīce
	CE marķējums
	UKCA marķējums
	Ražotājs
	Medicīniskā ierīce
	Nelietot atkārtoti
	Skatiet lietošanas instrukcijas
	Izlietot līdz
	Partijas numurs
	Pilnvarotais pārstāvis

LATVIEŠU VALODA

Norādījumi parauga paņemšanai:

 <p>1</p>	<p>Atveriet iepakojumu un izņemiet parauga paņemšanas mēģeni, nepieskaroties sūklīša galam. Ievietojiet sūklīti pēc iespējas ērtāk un dziļāk mutē un paberzējiet apakšējās smaganas (skatīt tuvplāna attēlu) uz priekšu un atpakaļ. Maigi paberzējiet smaganas 10 reizes. Ja iespējams, neberzējiet zobus.</p>
 <p>2</p>	<p>Maigi atkārtojiet berzēšanas kustību pretējā mutes pusē gar apakšējām smaganām vēl 10 reizes.</p>
 <p>3</p>	<p>Turiet mēģeni vertikāli, lai novērstu tās iekšpusē esošā stabilizējošā šķidruma izšļakstīšanos. Atskrūvējiet parauga paņemšanas mēģenes vāciņu, neskarot sūklīti.</p>
 <p>4</p>	<p>Pagrieziet vāciņu otrādi, ievietojiet sūklīti mēģenē un cieši aizveriet vāciņu.</p>
 <p>5</p>	<p>Apgrieziet aizvākoto mēģeni un enerģiski sakratiet 15 reizes.</p>



Izmantošanai in vitro diagnostikai un autorizētā neatliekamā gadījumā.

Šo paraugu paņemšanas ierīci nav apstiprinājusi Amerikas Zāļu aģentūra.

Amerikas Zāļu aģentūra ir apstiprinājusi šo paraugu paņemšanas ierīci lietošanai autorizētā neatliekamā gadījumā.

Šī paraugu paņemšanas ierīce ir atļauta tikai siekalu paraugu paņemšanai un kontrolei kā palīgizmeklimum nukleīnskābes noteikšanā no SARS-CoV-2, nevis citiem vīrusiem vai patogēniem.

Šī paraugu paņemšanas ierīce ir atļauta tikai ilg, kamēr tiek paziņots, ka pastāv apstākļi, kas atļauj izmantot in vitro diagnostiku ārkārtas lietošanai Covid-19 noteikšanai un/vai diagnostiskai saskaņā ar Federālā Pārtikas, zāļu un kosmētikas likuma 564. panta b) punkta 1. apakšpunktu, Amerikas Savienoto Valstu kodeksa 21. sadaļu. 360bbb-3 (b) (1), ja vien atļauja netiek pārtraukta vai atsaukta ātrāk.

DNAGENOTEK™

DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Otava, ON, Kanāda K2V 1C2

Izcili paraugi • Pierādīti labs izpildījums

Bezmaksas tel. (Ziemeļamerika): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Fakss: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com • www.dnagenotek.com

 Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Hāga, Nīderlande

Atbildīgā persona UK: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Kembridža, CB24 9BZ

Austrālijas sponsors: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sidneja, NSW 2000 Austrālija

ORACollect ir reģistrēta preču zīme, un DNA Genotek ir kompānijas DNA Genotek Inc. preču zīme. Daži DNA Genotek produkti var nebūt pieejami visos ģeogrāfiskajos reģionos. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi. Visi DNA Genotek protokoli, dokumenti un pieteikumi ir pieejami mūsu vietnes atbalsta sadaļā www.dnagenotek.com.

Patents (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2021 DNA Genotek Inc., OraSure Technologies, Inc. meitasuzņēmums, visas tiesības aizsargātas.
PD-PR-01103 (LV - Latvian) Issue 1/2021-04