


Forholdsregler ved prøvetaking:

Pass på at tuppen av svampen IKKE kommer i kontakt med noen andre overflater før prøvetakingen.

Donoren må IKKE spise, drikke, røyke eller tygge tyggegummi 30 minutter før innsamlingen av spyttprøven.

Tiltenkt bruk: For innsamling og stabilisering av RNA fra menneskelige spyttprøver

Innhold: Inneholder 1 prøvesett













Advarsler og forholdsregler: Kvelningsfare. Vær forsiktig når tuppen føres inn i munnen.

Skyll med vann hvis stabiliseringsvæsken kommer i kontakt med øyne eller hud. Må IKKE svelges. Se sikkerhetsdatablad på www.dnagenotek.com

Oppbevaring: 15 °C–25 °C

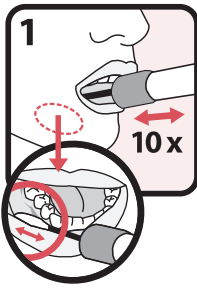
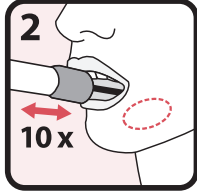

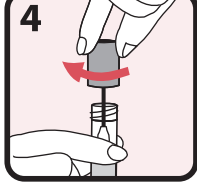
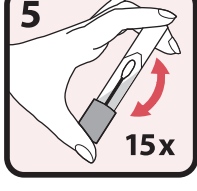
Sammendrag og forklaring av settet: ORACollect-RNA er et selvbetjent prøveinnsamlingssett som inneholder materiell og instruksjoner for innsamling av spyttprøver fra mennesker.

Etikettforklaring:

	Katalognummer
	Kun for bruk med resept
	Prøverør for medisinsk diagnostikk
	CE-merking
	UKCA-merking
	Produsent
	Medisinsk utstyr
	Må ikke gjenbrukes
	Les bruksanvisningen
	Brukes innen
	Partinummer
	Godkjent representant

NORSK

Instruksjoner for prøveinnsamling:

	Åpne pakken og fjern prøveinnsamleren uten å berøre tuppen. Plasser svampen så langt tilbake i munnen som mulig og gni den frem og tilbake mot det nedre tannkjøttet (se nærbilde). Gni den forsiktig mot tannkjøttet ti ganger. Prøv å unngå tennene hvis det er mulig.
	Gjenta gnibevegelsen forsiktig på det nedre tannkjøttet på den andre siden av munnen ytterligere ti ganger.
	Hold røret rett opp for å hindre at stabiliseringsvæsken i røret renner ut. Skru av hetten fra innsamlingsrøret uten å berøre svampen.
	Snu hetten opp ned, stikk svampen inn i røret og skru igjen hetten godt.
	Snu røret med hetten på og rist godt 15 ganger.



For prøverørdiagnostikk. Reseptlikhtig og for bruk med nødbrukstillatelse.

Denne prøveinnsamlingsenheten er ikke klarert eller godkjent av FDA.

Denne prøveinnsamlingsenheten er godkjent av FDA ved en EUA.

Denne prøveinnsamlingsenheten er kun godkjent for innsamling og opprettholdelse av spyttprøver som et hjelpemiddel ved registrering av nukleinsyrer fra SARS-CoV-2, ingen andre virus eller patogener.

Denne prøveinnsamlingsenheten er kun godkjent så lenge erklæringen om at omstendighetene som begrunner tillatelsen av nødbruk av prøverørdiagnostikk foreligger for registrering og/eller diagnostisering av COVID-19 underlagt avsnitt 564(b)(1) av Federal Food, Drug and Cosmetic Act, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), med mindre tillatelsen oppheves eller trekkes tilbake tidligere enn dette.

DNAGENOTEK™

■ DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Overlegne prøver • Utprøvd ytelse

Grønt nummer (North America): 1.866.813.6354
Tlf: +1 613 723 5757 • Faks: +1 613 723 5057
info@dnagenotek.com • www.dnagenotek.com

 Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Den Haag, Nederland

Britisk ansvarlig: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Australsk sponsor: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australia

ORACollect er et registrert varemerke og DNA Genotek er et varemerke tilhørende DNA Genotek Inc. Enkelte DNA Genotek-produkter kan være utlignende i enkelte geografiske områder. Ta kontakt med en salgsrepresentant for mer informasjon. Samtlige DNA Genotek-protokoller, white papers og merknader for bruk er tilgjengelige i støtteseksjonen på nettstedet vårt ved www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2021 DNA Genotek Inc., et datterselskap av OraSure Technologies, Inc., med enerett.
PD-PR-01145 (NB - Norwegian) Issue 1/2021-04