


OM-AC1 toiletaccessoire

Gebruikt in combinatie met  **OMNigene®GUT**


GEBRUIKSINSTRUCTIES

Dit toiletaccessoire wordt gebruikt in combinatie met de OMNigene®GUT set voor het eenvoudig opvangen van fecesmonsters.


Let op: er mag GEEN water uit het toilet, urine, schoonmaakmiddel of toiletverfrisser met dit toiletaccessoire in contact komen.

Bewaren bij: 15 °C tot 25 °C


Procedure:

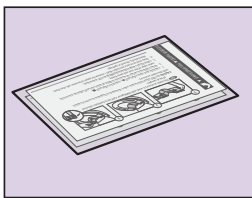


- 1** Er worden twee toiletaccessoires geleverd voor het geval het u bij de eerste poging niet lukt om ontlasting op te vangen.

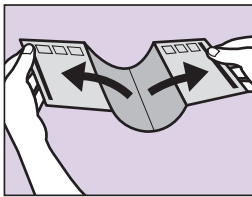


- 2** Trek voorzichtig de hoek met de markering ▲ open en herhaal dit bij de hoek met de ■.

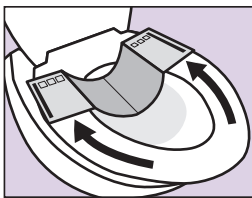

- 3** Bevestig het zelfklevende oppervlak van het toiletaccessoire aan de **ACHTERKANT van de toiletzitting** met het zelfklevende deel dicht tegen de buitenrand van de zitting aan en duw stevig aan.

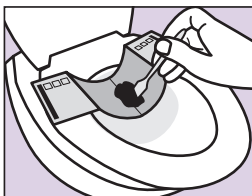

- 4** Neem een fecesmonster volgens de OMNigene®GUT gebruiksinstructies.

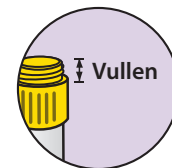

- 5** Laat het gebruikte accessoire in het toilet vallen. Wacht 1 minuut, zodat het papier zacht wordt en spoel dan door. U kunt het ook weggooien.

1 minuut

DNA genotek



OM-AC1 wordt in Nederland gemaakt voor DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Superieure monsters
Bewezen prestaties*

Tel: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

*OMNigene is een gedeponerd handelsmerk van DNA Genotek Inc.

Sommige DNA Genotek producten zijn mogelijk niet in alle geografische regio's verkrijgbaar, neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

Alle DNA Genotek producten, technische documentatie en toepassingsaanbevelingen zijn beschikbaar in het onderdeel 'support' van onze website op www.dnagenotek.com.

Octrooi (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2018 DNA Genotek Inc., een dochteronderneming van OraSure Technologies, Inc., alle rechten voorbehouden.
PD-PR-00689 (NL - Dutch) Issue 2/2018-08

