

OM-AC1-toiletbykomstigheid

Word gebruik saam met  **OMNIGene®-GUT**


GEBRUIKERSINSTRUKSIES

Hierdie toiletbykomstigheid word saam met OMNIGene®-GUT-stelletjie gebruik om insameling van ontlastingmonsters te fasiliteer.


Waarskuwing: MOENIE toelaat dat toiletwater, uriene, skoonmaakmiddel of geur in kontak met hierdie toiletbykomstigheid kom nie.

Berging: 15°C tot 25°C


Prosedure:

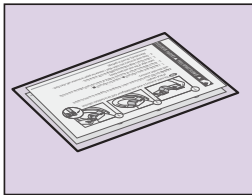


- 1** Twee toiletbykomstighede word verskaf in die geval waar u nie in staat is om 'n monster met die eerste poging te versamel nie.

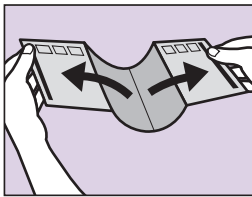

- 2** Maak die een kant versigtig oop met ▲; herhaal vir kant met ■.

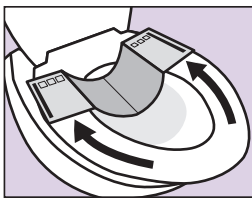

- 3** Heg kleefstoppervlak van bykomstigheid aan **AGTERKANT** van toiletsitplek met kleefstof naby aan die buitekant van die sitplek en druk ferm vas.

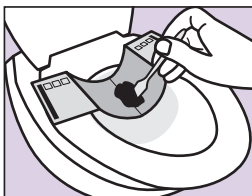

- 4** Versamel ontlastingmonster deur OMNIGene-GUT-gebruikersinstruksies te volg.



- 5** Gooi gebruikte bykomstigheid in die toilet. Wag 1 minuut vir papier om sag te word, en spoel dan. Alternatiewelik, gooi in asblik.

1 minuut

DNA genotek



OM-AC1 word in Nederland gemaak vir DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Superieure monsters
Bewese prestasie*

Tel: +1.613.723.5757
Faks: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

*OMNIGene is 'n geregistreerde handelsmerk van DNA Genotek Inc.

Sommige DNA Genotek-produkte is dalk nie in alle geografiese streke beskikbaar nie, kontak jou verkoopsverteenwoordiger vir besonderhede.

Alle DNA Genotek-protokols, witskrif en aansoeknotas, is in die bystandafdeling van ons webwerf beskikbaar, by www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2018 DNA Genotek Inc., 'n filiaal van OraSure Technologies, Inc., alle regte voorbehou.
PD-PR-00850 (AF - Afrikaans) Issue 1/2018-11

