


Réamhchúraimí bailiúcháin:

Déan cinnte NACH dtagann an barr spúinse i dteagmháil le aon dromchla sula mbailítear é.

NÍOR chóir don deontóir ithe, ól, tobac a chaitheamh ná guma a chogaint ar feadh 30 nóiméad sula mbailítear sampla seile.

Úsáid bheartaithe: Chun samplaí seile daonna RNA a bhailiú agus a chobhsú

Clár ábhair: Tá trealamh 1 bailiúcháin ann

Rabhaidh agus réamhchúraimí: Guais tachtach. Ba chóir a bheith cúramach ag cuir an spúinse isteach sa bhéal.

Nigh le huisce má thagann leacht cobhsú i dteagmháil le súile nó le craiceann. NÁ ionghabh. Féach MSDS ag www.dnagenotek.com

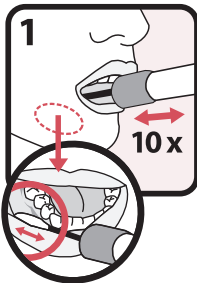
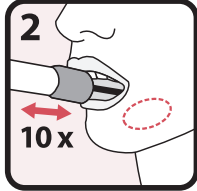

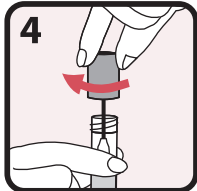
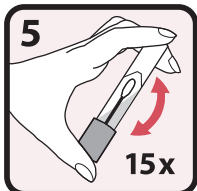
Stóras: 15°C-25°C

Achoimre agus míniú ar an trealamh: ORACollect-RNA féin bhailithe a sholáthraíonn na hábhair agus na treoracha chun samplaí seile daonna a bhailiú.

Eochair eolais lipéad:

REF	Uimhir Catalóg
Rx	Le haghaidh Úsáid oideas Amháin
IVD	In vitro feiste leighis dhiagnóiseach
CE	CE marcáil
UK CA	Marcáil UKCA
MD	Monaróir
MD	Feiste leighis
⊗	Ná athúsáid
i	Téigh i gcomhairle lena treoracha úsáide
D	Dáta dultha ó mhaith
LOT	Uimhir lola
EC REP	Ionadaí Údaraithe

GAEILGE
Treoracha maidir le bailiú an sampla:

 <p>1</p>	Oscail an pacáiste agus bain amach an bailitheoir gan teagmháil a dhéanamh le barr an spúinse. Cuir an spúinse chomh fada siar sa bhéal agus is compordach agus cuimil feadh na gumaí íochtaracha (féach an íomhá gar-amhairc) á mhothú siar agus aniar. Cuimil na gumaí go réidh 10 n-uaire. Seachain na fiacla a chuimilt, más féidir.
 <p>2</p>	Déan tairiscint chuimil arís go réidh ar an taobh eile den bhéal feadh na gumaí íochtaracha ar feadh 10 n-uaire breise.
 <p>3</p>	Coinnigh an feadán ina sheasamh chun an leacht cobhsú taobh istigh den fheadán a chosc ó dhoirtheadh. Oscail an caipín ón bhfeadán bailiúcháin gan teagmháil a dhéanamh leis an spúinse.
 <p>4</p>	Cas an caipín bun os cionn, cuir an spúinse isteach san fheadán agus dún an caipín go daingean.
 <p>5</p>	Aisiompagh an feadán le caipín agus croith go tréan 15 uair.



Do IVD, Rx agus le húsáid faoi Údarú um Úsáid Éigeandála.

Níor faomháodh ná ní ceadaíodh an FDA an ghléas bailithe samplach seo.

Tá an gléas bailithe samplach seo údaraithe ag FDA le húsáid i gcás éigeandála.

Níor údaráíodh an gaireas bailiúcháin samplach seo ach amháin chun eiseamail seile a bhailiú agus a cothabháil mar chabhair chun aigéad núicléasach a bhrath ó SARS-CoV-2, ní le haghaidh aon víris nó pataiginí eile.

Níl an fheiste bailiúcháin samplach seo ach údaraithe ar feadh ré an dearbhaithe go bhfuil imthosca ann a thugann údar le húsáid éigeandála diagnóisic in vitro chun COVID-19 a bhrath agus/nó a dhiagnóisiú faoi Alt 564 (b) (1) den tAcht Chónaidhme Bia, Drugaí agus Cosmaideacha, 21 USC § 360bbb-3(b)(1), mura ndéantar deireadh a chuir leis an t-údarú nó a chúlghairm níos luaithe.

DNAGENOTEK™

Samplaí d'ardchaighdeán • Feidhmíocht chruthaithe

■ DNA Genotek Crp.
3000 - 500 Palladium Sráid
Ottawa, ON, Ceanada K2V 1C2

Saor in aisce (Meiriceá Thuaidh): 1.866.813.6354
Teil.: +1.613.723.5757 • Facs: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com • www.dnagenotek.com

EC REP Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP An Háig, An Ísiltír

Duine Freagrach san RA: Emergo Consulting (R) TEO c/o Cr360 – UL Idirnáisiúnta, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Urraitheoir Astrálach: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sráid Sussex, Sydney, NSW 2000 An Astráil

Is trádmharc chlárúite é ORACollect agus is trádmharc de chuid DNA Genotek Crp. é DNA Genotek. D'fhéadfadh nach mbeadh roinnt táirgí DNA Genotek ar fáil i ngach réigiún geografach; déan teagmháil le d'ionadaí díolacháin le haghaidh sonraí. Tá gach prótacal de chuid DNA Genotek, chomh maith leis na páipéir bhána agus nótaí iarratais ar fáil sa mhír tacaíochta ar ár láithreán gréasáin ag www.dnagenotek.com.

Paitinn (www.dnagenotek.com/legal/notice)
© 2021 DNA Genotek Crp., fochuideachta de chuid OraSure Teicneolaíochtaí, Crp., gach ceart ar cosaint.
PD-PR-01102 (IE - Irish) Issue 1/2021-04