

Uso previsto: per la raccolta assistita di DNA umano da campioni di saliva.

Contenuto: il kit contiene liquido stabilizzante.

Avvertenze e precauzioni:

Rischio di soffocamento:

- Il kit di raccolta contiene un tappino.
- Il sacchetto di plastica contiene delle spugne.
- Occorre inserire la spugna nella bocca del donatore con cautela.

Per prelievi assistiti:

- NON lasciare il donatore senza sorveglianza.
- NON permettere al donatore di maneggiare la spugna, il tappino o la confezione.
- Lavare con acqua se il liquido stabilizzante venisse a contatto con gli occhi o con la pelle. Non ingerire. Vedere la scheda dati sicurezza materiale su www.dnagenotek.com

Conservazione: tra 15°C e 30°C (59°F-86°F)

Riepilogo e spiegazione del kit:

ORAgene-Dx è un kit di prelievo assistito che fornisce i materiali e le istruzioni necessari per la raccolta e la stabilizzazione di campioni di saliva umana.

Precauzioni per la raccolta:

NON rimuovere la pellicola di plastica dal coperchio dell'imbuto.

Verificare che la spugna non sia danneggiata ogni volta prima di inserirla nella bocca del donatore. Usare una seconda spugna se la prima mostrasse segni di usura o lacerazioni.

NON sostituire con altre spugne o scovoli.

Legenda dell'etichetta:

	Numero di catalogo
	Dispositivo medico-diagnostico per diagnosi in vitro
	Contrassegno CE
	Contrassegno UKCA
	Produttore
	Dispositivo medico
	Non riutilizzare
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Raccogliere la saliva entro e non oltre (Utilizzare entro)
	Numero di lotto
	Rappresentante autorizzato
	Attenzione

Istruzioni per l'uso

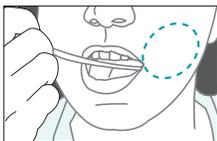
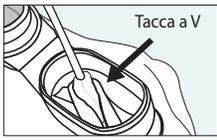
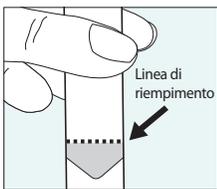
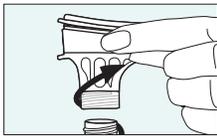
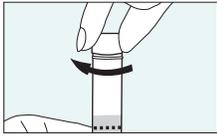
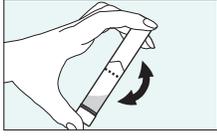
Leggere tutte le istruzioni prima della raccolta.

Procedura:

Assicurarsi che il donatore NON mangi, beva, fumi o mastichi gomma per i 30 minuti che precedono la raccolta di un campione di saliva.

Assicurarsi che il donatore sia in posizione verticale durante la raccolta del campione.

Raccogliere un campione di saliva seguendo i passaggi da 1 a 7 può richiedere fino a 15 minuti.

	1 Posizionare la spugna nell'incavo della guancia. Spostare delicatamente la spugna lungo le gengive e l'incavo delle guance per 30 secondi per assorbire il massimo di saliva possibile.
	2 Una volta che la spugna sarà satura di saliva, inserire la spugna nella tacca a V dell'imbuto. Strizzare la spugna per fare uscire la saliva usando un movimento di torsione e spinta contro la parete interna della tacca a V. La saliva scorrerà dentro la provetta.
	3 Ripetere questi passaggi (1 e 2) USANDO LA STESSA SPUGNA finché la saliva liquida (non le bolle) non avrà raggiunto la linea di riempimento. Verificare che la spugna non sia danneggiata ogni volta prima di inserirla nella bocca del donatore. Usare una seconda spugna se la prima mostrasse segni di usura o lacerazioni. Battere il fondo della provetta contro una superficie dura per ridurre il numero di bolle.
	4 Mantenere la provetta in verticale con una mano. Chiudere il coperchio dell'imbuto con l'altra mano, premendo saldamente sul coperchio fino a udire un forte clic. Il liquido nel coperchio verrà rilasciato nella provetta per mescolarsi alla saliva. Assicurarsi che il coperchio sia ben chiuso.
	5 Mantenere la provetta in verticale. Svitare l'imbuto dalla provetta.
	6 Utilizzare il tappino per chiudere saldamente la provetta.
	7 Scuotere la provetta tappata per 5 secondi. Smaltire l'imbuto e le spugne.

Vedere ulteriori istruzioni per l'uso PD-HB-00001 su www.dnagenotek.com

Esclusivamente per diagnosi in vitro   
Per uso dietro prescrizione e uso diretto al consumatore

DNAGENOTEK™

*Campioni superiori
Efficacia testata*

Prodotto in Canada
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Numero verde (Nord America): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

 Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP L'Aia, Paesi Bassi

Responsabile per il Regno Unito Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Sponsor australiano: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australia

ORAgene è un marchio commerciale registrato e DNA Genotek è un marchio registrato di DNA Genotek Inc. Alcuni prodotti DNA Genotek possono non essere disponibili in tutte le aree geografiche; si prega di contattare il vostro rappresentante alle vendite per avere ulteriori dettagli.

Tutti i protocolli, white paper e note applicative DNA Genotek sono disponibili nella sezione di supporto del nostro sito web www.dnagenotek.com.

Brevetto (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2021 DNA Genotek Inc., una filiale di OraSure Technologies, Inc., tutti i diritti riservati. PD-PR-01174 (IT - Italian) Issue 1/2021-05