

Nameravana uporaba: Za podporno jemanje človeškega DNK iz vzorcev sline.

Vsebuje: Oprema vsebuje stabilizatorsko tekočino.

Opozorila in varnostni ukrepi:

Nevarnosti zadušitve:

- Majhen pokrov v opremi za jemanje vzorca.
- Plastična vrečka, ki vsebuje gobice.
- Morate biti pozorni, ko vstavljate gobico v usta darovalca.

Za nadzorovano jemanje:

- NE pustite darovalca brez spremstva.
- NE dovolite darovalcu, da rokuje z gobico, majhnim pokrovom ali embalažo.
- Izperite z vodo, če stabilizatorska tekočina pride v stik s očmi ali kožo. Ne zaužijte. Glejte MSDS na www.dnagenotek.com.

Shranjevanje: 15°C-30°C (59°F-86°F)

Vsebina in razlaga opreme:

Oragene-DX je podpora oprema za jemanje vzorca, ki zagotavlja materiale in navodila za jemanje in stabiliziranje vzorcev sline.

Varnostni ukrepi pri jemanju vzorca:

NE odstranite plastične prevleke iz lijačnega pokrova.

Vsakič pregledajte gobico, če je poškodovana, preden jo vstavite v usta darovalca. Uporabite drugo gobico, če prva gobica pokaže kakršne koli znake obrabe ali raztrganosti.

NE nadomestite z drugimi gobicami ali krpami.

Legenda etikete:

REF	Številka kataloga
IVD	Diagnostična medicinska naprava v epruveti
CE	CE označitev
UKCA	UKCA označitev
	Izdelovalec
MD	Medicinska naprava
	Ne uporabite ponovno
i	Upoštevajte navodila za uporabo
	Vzemite slino (Uporabno do)
LOT	Številka dela
EC REP	Pooblaščen predstavnik
	Svarilo

Navodila za uporabnika

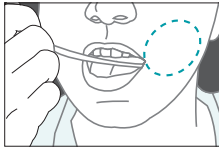
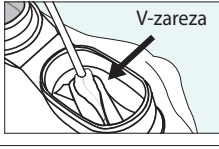
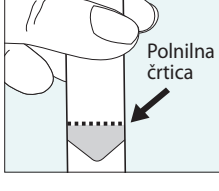
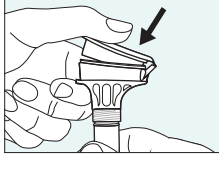
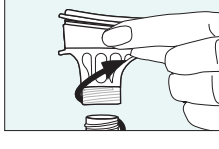
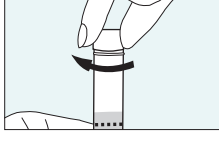
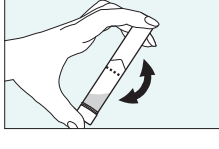
Preberite vsa navodila pred jemanjem vzorca.

Postopek:

Zagotovite, da darovalec NE je, pije, kadi ali žveči žvečilnega gumija 30 minut pred jemanjem vzorca sline.

Zagotovite, da je darovalec v pokončnem položaju med jemanjem vzorca.

Morda traja 15 minut, da vzamete vzorec sline, če sledite korakom od 1 do 7.

	1 Položite eno gobico v solzni mešič obraza. Nežno premikajte gobico vzdolž dlesni in notranjih ličnic 30 sekund, da vpijete toliko sline kot je mogoče.
	2 Ko je enkrat gobica prepojena s slino, vstavite gobico v V-zarezo lijaka. Sline stisnite iz gobice z zvijanjem in potiskanjem proti notranji steni V-zareze. Slina bo pritekala v cevko.
	3 Ponovite te korake (1 do 2), tako da UPORABLJATE ISTO GOBICO, dokler tekoča slina (ne mehurčki) ne doseže polnilne črtice. Vsakič pregledajte gobico, če je poškodovana, preden jo vstavite v usta darovalca. Uporabite drugo gobico, če prva gobica pokaže kakršne koli znake obrabe ali raztrganosti. Nastavite dno cevke ob trdi površini, da znižate število mehurčkov.
	4 Z eno roko držite cevko pokončno. Zaprite pokrov z drugo roko tako, da čvrsto potiskate pokrov, dokler ne slišite glasnega klika. Tekočina v pokrovu se bo spustila v cevko, da se zmeša s slino. Priprčajte se, da je pokrov čvrsto zaprt.
	5 Držite cevko pokončno. Odvijte lijak od cevke.
	6 Uporabite majhen pokrov, da čvrsto zaprete pokrov.
	7 Pretresajte pokrito cevko 5 sekund. Zavrzite lijak in gobice.

Glejte dodatna navodila za uporabo PD-HB-00001 na www.dnagenotek.com

Za diagnostično uporabo v epruveti    
Na recept in za neposredno uporabo za potrošnika

DNAgenotek[™]

*Odlični vzorci
Dokazana učinkovitost*

Narejeno v Kanadi
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Brezplačni telefon (Severna Amerika): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Faks: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

  Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Nizozemska

Odgovorna oseba za VB: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 - UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Avstralski sponzor: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Avstralia

Oragene je registriran zaščitni znak in DNA Genotek je zaščitni znak DNA Genotek Inc. Nekateri DNA Genotek izdelki morda ne bodo na voljo v vseh geografskih regijah; kontaktirajte vašega prodajnega zastopnika za podrobnosti. Vsi DNA Genotek protokoli, beli papirji in aplikacijski znaki so na voljo v podpornem delu na naši internetni strani na www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2021 DNA Genotek Inc., podružnica OraSure Technologies, Inc., vse pravice pridržane.
PD-PR-01182 (SL - Slovene) Issue 1/2021-05