


**Mjere opreza pri prikupljanju:**

**Davatelj NE SMIJE jesti, piti, pušiti ili žvakati žvakaću gumu 30 minuta prije uzimanja uzorka pljuvačke.**

**Pazite da vrh spužve NE dotakne bilo koju površinu prije prikupljanja.**

**Namjena:** ORAcollect<sup>®</sup>-Dx je namijenjen za neinvazivno prikupljanje uzoraka pljuvačke. Ljudska DNK iz uzorka pljuvačke je izolirana, stabilizirana i prikladna za uporabu u molekularno-dijagnostičkim primjenama koje je odobrila FDA. Uzorci pljuvačke prikupljeni uporabom ORAcollect-Dx su stabilizirani i mogu se dugoročno transportirati i / ili čuvati pod uvjetima okoline.












**Sadržaj:** komplet sadrži tekućinu za stabilizaciju.

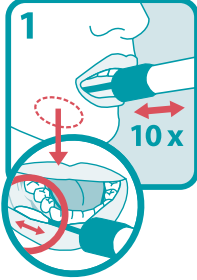


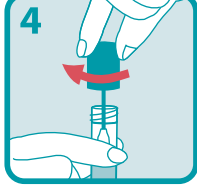
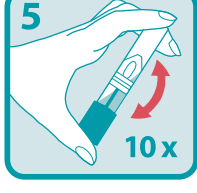
**Upozorenja i mjere opreza:**

- Samo Rx. Za stručnu uporabu.
- Pažljivo pročitajte sve upute prije uzimanja uzoraka; odstupanje može rezultirati neadekvatnim uzorkom i utjecati na količinu DNK.
- Opasnost od gušenja. Potreban je oprez pri umetanju spužve u usta.
- Donatori s kserostomijom (suha usta) možda neće prikupiti odgovarajući uzorak pomoću ovih uputa što rezultira nižom količinom DNK i nevaljanim uzorkom.
- Isperite vodom ako tekućina za stabilizaciju dođe u doticaj s očima ili kožom. NEMOJTE progutati. Pogledajte MSDS na [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

**Čuvanje:** 15°C-25°C

**Legenda etiketa:**

	Kataloški broj
	Dijagnostički medicinski uređaj In vitro
	CE oznaka
	UKCA oznaka
	Proizvođač
	Medicinski uređaj
	Nemojte ponovno koristiti
	Pogledajte upute za uporabu
	Prikupiti uzorak do (upotrijebiti do)
	Broj serije
	Ovlašteni predstavnik

	<p>Otvorite paket i izvadite sakupljač ne dodirujući vrh spužve. Spužvu smjestite što je moguće više unatrag u usta i trljajte po donjim desnama (pogledajte sliku izbliza) naprijed-natrag. Nježno istrljajte desni 10 puta. Po mogućnosti izbjegavajte trljanje zuba.</p>
	<p>Nježno ponovite pokrete trljanja na suprotnoj strani usta duž donjih desni dodatnih 10 puta.</p>
	<p>Držite epruvetu uspravno kako biste spriječili prolijevanje sadržaja iz epruvete. Odrnite plavi poklopac s epruvete za prikupljanje ne dodirujući spužvu.</p>
	<p>Okrenite poklopac naopako, umetnite spužvu u epruvetu i čvrsto zatvorite poklopac.</p>
	<p>Preokrenite zatvorenu epruvetu i snažno protresite 10 puta.</p>



Za dijagnostičku uporabu in vitro



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Odgovorno lice za Veliku Britaniju: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Australski sponzor: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australia

ORAcollect je registrirani zaštitni znak, a DNA Genotek je zaštitni znak tvrtke DNA Genotek Inc. Neki proizvodi tvrtke DNA Genotek možda neće biti dostupni u svim zemljopisnim regijama; za detalje se obratite svom prodajnom predstavniku. Svi DNA Genotek protokoli, tehnički priručnici i napomene o prijavi dostupni su u odjeljku za podršku na našoj internetskoj stranici [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Patent ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))  
 © 2021 DNA Genotek Inc., podružnica tvrtke OraSure Technologies, Inc., sva prava pridržana.  
 PD-PR-01192 (HR - Croatian) Issue 1/2021-04

**DNAGENOTEK™**

*Vrhunski uzorci*  
*Dokazana učinkovitost*

Besplatna telefonska linija (Sjeverna Amerika):  
 1.866.813.6354  
 Tel.: +1.613.723.5757 • Faks: +1.613.723.5057  
[info@dnagenotek.com](mailto:info@dnagenotek.com)  
[www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

■ DNA Genotek Inc.  
 3000 - 500 Palladium Drive  
 Ottawa, ON, Canada K2V 1C2